



# Ergotron® StyleView™ Carts

Maximale mobiliteit voor medische applicaties



## Kenmerken

- Gepatenteerde Constant Force™ (CF™) technologie zorgt voor een soepele hoogteverstelling
- Ook leverbaar met Styleview Power Systeem inclusief StyleLink software
- Het universele ontwerp maakt het opwaarderen van hardware in de toekomst eenvoudig en vermindert de operationele kosten per gebruiker
- 51 cm hoogteverstelling voor een ergonomische data invoer, zowel zittend als staand
- Geïntegreerd kabelmanagement zorgt voor een nette kabelrouting
- Beveiligingsloten helpen diefstal van de apparatuur te voorkomen
- Barcode scanner houder voor gemakkelijk toegang tot de scanner
- Hoogwaardige wielen voor het gemakkelijk verplaatsen over alle soorten vloeren
- EN 60601-1 certificering betekent hoogwaardige veiligheid en betrouwbaarheid
- Diverse accessoires beschikbaar voor het verbeteren van de workflow productiviteit
- Volledig geassembleerd geleverd

More motion. Less effort.

**Feel the difference.**

De vele unieke eigenschappen en het doordachte ontwerp van de cart helpen u accurater en efficiënter te werken, nu en als u straks voor andere technologie kiest. Verplegend personeel, IT managers in ziekenhuizen en ergonomie experts zijn betrokken bij alle stadia van het ontwerpproces van de StyleView cart. Het resultaat is een uiterst functionele en ergonomische cart. De StyleView is een logische investering om tegemoet te komen aan de behoeften van de medische wereld. Het is ook een uitstekende keuze voor elke andere omgeving waar optimale data invoer vereist is.

- Innovatie en kwaliteit daar waar zorg wordt verleend
- Verbeterde efficiëntie en accuratesse van zorg ondersteunt de veiligheid van de patiënt
- Uitzonderlijke ergonomie voor iedereen in de gezondheidszorg

## StyleView LCD Cart



Ruim werkblad voor dagelijkse werkzaamheden.



Universele CPU houder beveiligd de CPU en maakt deze tevens toegankelijk op de LCD carts.

## StyleView Dual Display Cart




De StyleView Dual Display Cart verbetert de analyse van medische beelden voor radiologie toepassingen.

## StyleView Notebook Cart



Werkblad klapt open voor toegang tot notebook en de batterijen. Afsluitbaar om apparatuur te beveiligen.

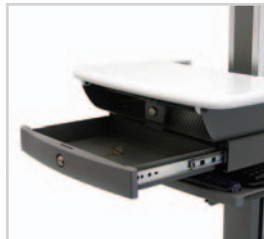

Optionele afsluitbare notebook lade (open getoond) kan worden gebruikt voor opslag van toebehoren.

## StyleView Cart met Tablet PC optie



Verander eenvoudig elke StyleView Cart in een Tablet PC Cart gebruikmakend van de Tablet PC optie (separaat te bestellen).



Het gebruik van een Tablet PC op de StyleView Cart brengt patiëntgegevens daar waar zorg wordt verleend.

**De geïntegreerde Constant Force (CF™) hoogverstellingstechnologie voorziet in 51 cm soepele hoogverstelling.**

**Bekijk eenvoudig de status van het Power Systeem met de Remote User Interface (RUI).**

**Ook verkrijgbaar met StyleView Power Systeem; voorziet de CPU, LCD monitor, notebook en Tablet PC van mobiele stroom.**

## Basis specificaties

**Standaard StyleView Cart kenmerken:** ruim werkblad (alleen LCD en notebook versies), opbergmandje met handvat, scanner houder, kabelgeleidingssysteem, full-size toetsenbordhouder met rechts/links muisblad, gel polssteun, muisblad, hoogtevergrendelingslot en luxe, dubbel uitgevoerde, voor alle oppervlaktes geschikte zwenkwielen.

**Hoogte:** hoogste positie -179 cm, laagste positie - 129 cm

**Afmetingen onderstel:** 45 x 45 cm

**Gewichtscapaciteit:** LCD – 11,3 kg  
Toetsenbord – 2,27 kg

(StyleView Dual Display Cart – totaal gewicht voor 2 LCD monitoren: 15,4 kg)

**Wisselspanning ingang/uitgangssignaal 230 VAC / 50 Hz:**  
Europese of UK/Ierland stekker en contactdoos

### Optionele accessoires:

Tablet PC optie, afsluitbare medicijnlades, extra werkblad, afsluitbare notebook lade, T-slot houder, LX Notebook houder, opbergvak voor injectienaalden.

### Monitorbevestigingsopties\*:

VESA FDMI MIS-D 100/75, C  
(gatenpatroon 100x100 mm en 75x75mm)

\* Tablet PC optie is geschikt voor Tablet PC's en docking stations die voldoen aan de VESA standaard. Een aparte interface plaat kan nodig zijn.

© 2006 Ergotron, Inc.  
rev. 02/06/2006 870-05-054

**Content is subject to change without notification.**

**Ergotron Nederland BV**  
Beeldschermweg 3  
3821 AH Amersfoort  
Tel: 033 45 45 600  
Fax: 033 45 45 649  
info.nl@ergotron.com  
www.ergotron.nl

